



Municipalidad de Santa María La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com

Informe de Compras del 21 al 30 de Noviembre de 2020

Fecha	N° Orden de Pago	N° Orden de Compra	Proveedor	Descripcion	Monto L.	Observaciones
30/11/2020	11353	00173	GLOBAL IMPORTS S DE R L DE CV	PAGODE FACTURA # 002-01-0021410 POR COMPRA DE 200 GORROS DE ENFERMERIA, 100 PRUEBAS RAPIDAS, 300 MASCARILLAS KN95	33,220.00	PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE. EJECUTADO CON PROGRAMA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
30/11/2020	11354	00174	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A	PAGO DE COTIZACION # CDJ 936-2020 POR COMPRA DE DOPPLER VASCULAR SONO TRAX.	26,261.69	PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE DE LOS PLANES, EJECUTADO CON PROGRAMA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
TOTALES					59,481.69	


ALCALDÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO MUNICIPAL
SANTA MARÍA, L.P.
Dra. Sofia Nicolas L.
Contabilidad y Presupuesto



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
 EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/11/2020
 Hora : 11:47 a.m.
 USUARIO: GS.NICOLAS
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11353

L.: 33,220.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 776

Fecha de Emisión: 30/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GLOBAL IMPORTS S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015756382

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:




PAGODE FACTURA # 002-01-0021410 POR COMPRA DE 200 GORROS DE ENFERMERIA, 100 PRUEBAS RAPIDAS, 300 MASCARILLAS KN95 PARA EQUIPA,IENTO DEL CENTRO DE TRIAJE. EJECUTADO CON PROGRAMA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	33,220.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,220.00
Monto Total:		33,220.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,220.00

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwm8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFfT2SoygIVfPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00173

Programa: 77 Actividad 002 Proyecto No.

Fecha: 30/11/2020 RTN Proveedor 05079015756382

SEÑOR (ES): Global Imports S. de R.L

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	200	Gorros de Enfermería	2.10	420.00
2	100	Prueba IGM-IGG Covid-19	148.00	14,800.00
3	300	Mascarillas KN95 3D	60.00	18,000.00
		TOTAL		33,220.00

Valor Total en letras: Treinta y Tres Mil Doscientos Veinte Eneques Excedentes

CONDICIONES: Crédito: Plazo: Efectivo: Cheque

OBSERVACIONES: Compra realizada con el Programa Operación Fuerza Honduras.

E.N.A.G. Tel. 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



[Signature]
TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello



[Signature]
AUDITOR
Firma y sello



GLOBAL IMPORTS S. DE R.L.
 Tercera principal, Bv. Rio de Piedras, Ave
 Circunvalacion 6 edif. S.O. Bay Plaza, San Pedro Sula,
 Tel. 2510-0792, Correo: axay@globalimportslm.com
 RTN 05019015756382
 CAI ZE61AF-17DCE5-274398-3E8710-013885-E7

FACTURA
 002-002-01-00021410
 Fecha: 30/11/2020
 Vence: 30/11/2020
 Hora: 11:10:30

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ**
 R.T.N.: **12179003434704**

Correlativo asignado
 De 002-002-01-00019501
 al 002-002-01-00027500
 Fecha Limite de emision: 04/01/2021

Datos de adquirente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Reg. de Exoneracion:

CAI: ZE61AF-17DCE5-274398-3E8710-013885-E7

No. Registro SAG (L13) No. de Registro SAG

Código	Descripción	Condiciones de pago			Cantidad	Precio U.	Descuento	Cantidad
GORROS	GORROS DE ENFERMERIA DESCARTABLE CO	200	2.10	0.00			420.00	
SAFECARE BIO-	PRUEBA IGM - IGG COVID-19 SAFECARE BIO T	100	148.00	0.00			14,800.00	
GB 2626-2006-1	MASCARILLAS KN95 3D PESCADO	300	60.00	0.00			18,000.00	



RTN 05019015756382
 Ave. Circunvalacion, Edif. Bay Plaza
 San Pedro Sula, HN, CA

Julieth Inestroza

Descuentos y rebajas: Le 0.00
 Otro Descuento: 0.00

Firma de cliente

Valor Exento: L 33,220.00
 Valor Exonerado: L 0.00
 Valor Gravado 15%: L 0.00
 Valor Gravado 18%: L 0.00
 I.S.V. 15%: L 0.00
 I.S.V. 18%: L 0.00
 Total Operación: L 33,220.00

Total Moneda Nacional: 33,220.00

Total Items: 3

Original

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

www.sistemasyequipo.com Operador: CAJA1

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 30/11/2020 10:44:52 a.m.
N° Ref Bancaria: 8939497

Monto: LPS 33,220.00

Cuenta de Origen: **_***_***061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

Cuenta / Banco de Destino: 020111002463 / BANCO ATLANTIDA, S.A.
Nombre Beneficiario: GLOBAL IMPORTS

Descripcion: COT 20001019 BIOSEGURIDAD

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 30/11/2020 10:44:56 a.m.



GLOBAL IMPORTS S DE RL DE CV
 EDIFICIO BAY PLAZA, AVE. CIRCUNVALACIÓN, SAN PEDRO SULA, HN
 CEL +504 99914251
 MARCELLA.SIKAFFY@GLOBALIMPORTSHN.COM
 RTN 05019015756382



COTIZACION

Fecha	No
27/11/2020	20001019

Vendido a:
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
 DEPTO DE LA PAZ
 HONDURAS

Despachar a:
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
 DEPTO DE LA PAZ
 HONDURAS

Terminos de Pago	Vendedor	Validez	Via Desp
PAGO DE CONTADO		30 días	TERRESTRE

Linea	Modelo	Descripción	Color	Precio	Total
1	200	GORRO DESCARTABLE GORRO DE ENFERMERÍA DESCARTABLE CON ELASTICO	BLANCO	L 2.10	L 420.00
2	100	TEST KIT KIT DE PRUEBA SARS COVID 19 MARCA LECCURATE BY LEPU MEDICAL ALTA PRECISION INCLUYE LANCETA, PIPETA, REACTIVO KIT DE PRUEBA	BLANCO	L 148.00	L 14,800.00
3	300	KN95 3D RESPIRADOR KN95 3D DE TIRAS UNIDAS, COBERTURA >70% DEL ROSTRO, DE ALTA EFICIENCIA >98% EMPAQUE INDIVIDUAL PAQUETE DE 5 UNIDADES CERTIFICADO GB2626-2006	BLANCO	L 60.00	L 18,000.00



BAC HONDURAS
 CUENTA DE AHORRO
 # 728044431
 GLOBAL IMPORTS S DE RL
 RTN 05019015756382

TIEMPO DE ENTREGA:
 INMEDIATO
 ENVIOS FUERA DE SPS CAEX Incluido

Sub Total	L	33,220.00
15% Impuesto Sobre Venta		EXENTO
Flete Interno		INCLUIDO
Gran TOTAL	L	33,220.00

GLOBAL IMPORTS S DE RL COMPLETE SOURCING AGENT ASIA & PACIFIC



R.T.N. 05019015756382
 Ave. Circunvalación, Edif. Bay Plaza
 San Pedro Sula, HN, CA

Handwritten signature



PRODUCTOS MEDICOS S. DE R.L.

San Pedro Sula, Cortes
Bo. Las Acacias 5-6 ave. 11 calle.
Teléfonos 2516-1343/43
RTN 05019006503247

COTIZACION

FECHA: 26-nov-20
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE STA. MARIA DE LA PAZ

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	PAQX100	GORROS CON ELASTICO TIPO ACORDEON COLOR AZUL	122.00	244.00
3	KITX30 PRUEBAS	PRUEBAS RAPIDAS DE COVID 19 IgG/IgM	5,950.00	17,850.00
COTIZACION VALIDA POR UNA SEMANA, PRODUCTO ACTUALMENTE EXENTO			Sub-total	18,094.00
			Imppto. s/vtas.	
			Total	18,094.00




Dirección: Res. La Cumbre, Edificio Soles, Cubículo 03
Licencia Sanitaria No. HN-LED-0420-0004
RTN:08019019134352

Cliente: Alcaldía Municipal Santa María La Paz
No. 801
Fecha: 26/11/2020

Contacto: Diana Mireya Suazo
Correo: dmsuazo@hotmail.com
Celular: (504) 9992 3804

Lista Precios Equipo Bioseguridad

No.	Equipo de protección	Especificaciones Mínimas	Descripción de uso	Cantidad a cotizar	PRESENTACIÓN	Tiempo de Entrega	Precio Unitario	Total	Nota
1	Mascarilla cubre boca	Mascarilla Niosh N95	Duración Según especificación medica	300.00	UNIDAD	Inmediata	L 170.00	L 51,000.00	
2	Gorros	Gorros de Protección	Gorro Seguridad	2.00	Caja 100 Unidades	INMEDIATA	L 290.00	L 580.00	
3	Pruebas Rápidas	Pruebas Rápidas para la detección de Covid-19 (YUNO DIAGNOSTICS C.O.)	Unico uso (Presentación en KIT de 25 unidades)	100.00	UNIDAD	INMEDIATA	L 250.00	L 25,000.00	
Sub Total								L	76,580.00
ISV								L	-
Total a Pagar								L	76,580.00
Valor de la Cotización incluye el primer envío									


Lic. Diana Suazo
Gerente General



INFORME DE CLASIFICACIÓN POR RIESGO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

La Agencia de Regulación Sanitaria y la Dirección De Dispositivos Médicos y Otros Dispositivos de Interés Sanitario, en uso de sus facultades que la ley le confiere, con fecha: **16 DE JUNIO DEL AÑO 2020** y No. de expediente de clasificación: **ARSA-0620-CDM-0139**, resuelve conceder el trámite de CLASIFICACIÓN POR RIESGO SANITARIO EN LÍNEA al Dispositivo Médico(s) descrito(s) a continuación:

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO	
Dispositivo Médico (s)	Nombre del Producto: KIT DE PRUEBA COMBINADA DE ANTICUERPOS IGG / IGM DE CORONAVIRUS (SARS-COV-2) Nombre Genérico: PRUEBA DE DIAGNOSTICO IN VITRO PARA LA DETECCIÓN DE COVID-19 Código Internacional: GMDN, 50298 Titular del producto: YUNO DIAGNOSTICS CO., LTD. / CHINA Fabricante: YUNO DIAGNOSTICS CO., LTD. / CHINA
Presentación Comercial	CAJA DE CARTON CONTENIENDO 25 PRUEBAS DE KIT DE PRUEBA COMBINADA DE ANTICUERPOS IGG / IGM DE CORONAVIRUS (SARS-COV-2) CON CODIGO DE REFERENCIA: YN401825 Forma de Presentación: KIT Empaque Secundario y Primario: CAJA DE CARTÓN
Información del solicitante	Sociedad o Empresa: MERCADEO INTERNACIONAL NACIONAL S. DE R.L DE C.V. "MERCAIN" Representante Legal: DIANA MIREYA SUAZO DIAZ
Otros	Observaciones: LA APLICACIÓN Y USO DE LA PRUEBA AUTORIZADA SERA SEGÚN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD.

Con base en la combinación de criterios tales como, duración del contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto local contra efecto sistémico, se clasifica el Dispositivo Médico antes descrito de la siguiente manera:

CLASE III: SON LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MUY ALTO RIESGO SUJETOS A CONTROLES ESPECIALES, DESTINADOS A PROTEGER O MANTENER LA VIDA O PARA USO DE IMPORTANCIA SUSTANCIAL EN LA PREVENCIÓN DEL DETERIORO DE LA SALUD HUMANA, O SI SU USO PRESENTA UN RIESGO POTENCIAL DE ENFERMEDAD O LESIÓN.

Vigente hasta:
16 DE DICIEMBRE DEL 2020

En virtud del Estado de Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) declarado mediante Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, esta autorización es de carácter temporal y estará vigente por el término que dure la Emergencia Sanitaria y hasta por sesenta (60) días hábiles; a partir del primer día hábil, una vez terminado el Estado de Emergencia Sanitaria. Periodo en el cual Usted deberá adjuntar la presente autorización y completar la documentación en original para presentarla en la ARSA y en caso de no hacerlo la autorización quedará cancelada.

La emisión del presente certificado y la impresión en soporte físico es una reproducción del documento original que se encuentra en formato electrónico, cuya representación digital goza de plena autenticidad, integridad y no repudio; lo anterior con fundamento en el Decreto Ejecutivo PCM-016-2020 Artículo 02, Artículo 7 de la Ley sobre Firmas Electrónicas reformado mediante Decreto Legislativo 33-2020 Artículo 38 inciso "A".

El INFORME DE CLASIFICACION POR RIESGO aquí autorizado podrá en cualquier momento ser cancelado si el producto resulta ser nocivo o no-seguro en las condiciones normales de uso, que se haya demostrado que el producto no es terapéuticamente eficaz; cuando se demuestre que el producto no tiene la composición cuantitativa o cualitativa autorizada o cuando se incumplan las garantías de calidad y estabilidad establecidas en las especificaciones del fabricante o cuando el producto se comercialice en condiciones diferentes con las que fue aprobada.

DRA. EVELIN HERNÁNDEZ
DIRECTORA DISPOSITIVOS MÉDICOS





Y OTROS DISPOSITIVOS DE INTERÉS SANITARIO
AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA



Novel coronavirus(SARS-CoV-2) IgG/IgM Antibody Combined Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatographic Assay)

Please read this manual carefully before operation to ensure proper use

TEST KIT DESCRIPTION

The SARS-CoV-2 Rapid Test qualitatively detects IgG and IgM antibodies to SARS-CoV-2 in human serum, plasma or whole blood. The test applies colloidal gold method and is a tool to assist in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection. For medical professional use only.

SUMMARY

In early January 2020, a novel coronavirus (SARS-CoV-2) was identified as the infectious agent causing an outbreak of viral pneumonia in Wuhan, China, where the first cases had their symptom onset in December 2019.¹ Coronaviruses are enveloped RNA viruses that are distributed broadly among humans, other mammals, and birds and that cause respiratory, enteric, hepatic, and neurologic diseases.² Six coronavirus species are known to cause human disease.³ Four viruses—229E, OC43, NL63, and HKU1 — are prevalent and typically cause common cold symptoms in immuno-competent individuals.³ The two other strains—severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-COV) and Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-COV)—are zoonotic in origin and have been linked to sometimes fatal illness.⁴

Common signs of infection include respiratory symptoms, fever, cough, shortness of breath and breathing difficulties. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure and even death.⁵

Standard recommendations to prevent infection spread include regular hand washing, covering mouth and nose when coughing and sneezing, thoroughly cooking meat and eggs. Avoid close contact with anyone showing symptoms of respiratory illness such as coughing and sneezing.

PRINCIPLE

Novel coronavirus(SARS-CoV-2) IgG/IgM Antibody Combined Test Kit is a colloidal gold-based method for detecting IgG and IgM antibodies against SARS-CoV-2 in whole blood, serum or plasma samples. new coronavirus recombinant antigen and chicken IgY were used as chromogenic markers on the binding pad of this test strip, and a mouse anti-human IgM monoclonal antibody was coated on the detection line (T) on the nitrocellulose membrane. And mouse anti-human IgG monoclonal antibody, the goat's anti-chicken IgY polyclonal antibody was coated at the quality control line (C). During the detection, when the sample to be tested contains IgM or IgG, it combines with the colloidal gold-labeled new coronavirus recombinant antigen to form an immune complex, which is captured and enriched by the reagent fixed on the membrane at the detection line (T) to form M Line or G line. The colloidal gold-labeled antibody diffused to the QC region and was captured by the secondary antibody to form a purple-red band in the QC region.

KIT CONTENTS

1. Reagent card: coated with new colloidal gold-labeled recombinant coronavirus recombinant antigen and chicken IgY glass fiber membrane, coated with mouse anti-human IgM monoclonal antibody and mouse anti-human IgG monoclonal antibody (solid phase) and sheep anti-chicken IgY nitrocellulose film, water absorption pad, PVC baseboard.

2. Sample dilution: 3mL / piece, containing phosphate, preservatives etc.
3. Detect components not required: timer
4. The components in different lot number are not interchangeable.

STORAGE AND STABILITY

The kit is stored in a dry and dark place at 4-30 ° C, and the validity period is 18 months (production date, expiration date or expiration date: see the label); the test reagent card is effective within 60 minutes after being exposed to a temperature of 25 ° C and a humidity of 40 to 65%.

PRECAUTIONS

Follow these instructions for the best results:

1. This kit is for in vitro diagnostic use only and cannot be reused.
2. Check the tightness of the aluminum foil bag before use. If there is a problem with the seal, do not use it.
3. Do not use expired reagents, do not mix reagents of different batches.
4. The test reagent card should be used immediately after opening, be careful not to get wet. Test reagent cards stored refrigerated in a refrigerator, and left to room temperature before opening for use.
5. Since whole blood samples are easily affected by factors such as hemolysis or blood stickiness, blood clots, it is recommended that serum / plasma samples be used.
6. Treat all samples and reaction waste as sources of infection.
7. When testing, please pay attention to protection. Wastes such as used test reagent cards are treated as biomedical waste.
8. Sample testing should be performed in a laboratory with certain conditions. All samples and materials in the testing process should be handled in accordance with the operating practices of infectious disease laboratories.

SAMPLE COLLECTION AND PREPARATION

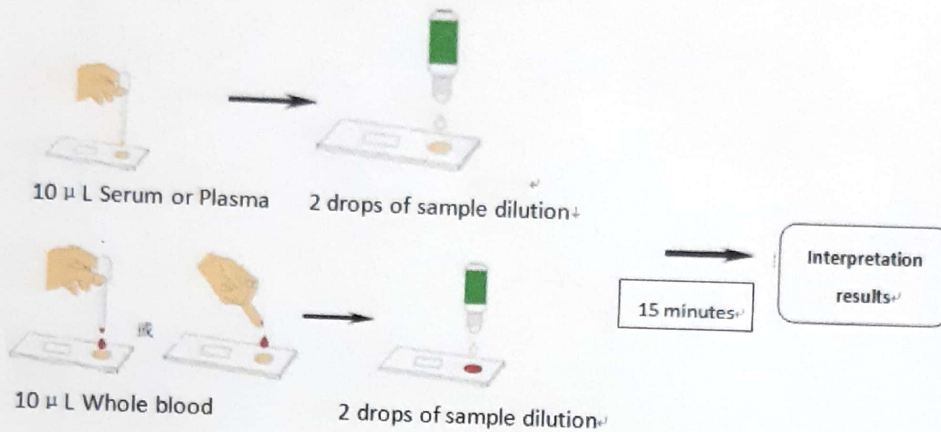
- 1) This test card is suitable for testing whole blood, serum and plasma samples.
- 2) Whole blood and plasma samples can use EDTA, dipotassium, lithium heparin anticoagulant
- 3) Serum or plasma should be separated and tested as soon as possible after collection of clinical blood samples, and samples should not be left at room temperature for more than 4 hours.
- 4) Serum and plasma samples can be stored for 3 days at 2-8 ° C and 30 days below -20 ° C. Do not freeze and thaw repeatedly.
- 5) Whole blood samples can be stored for 3 days at 2 ~ 8 ° C, and should not be stored frozen. Hemolyzed samples should be discarded.
- 6) Before testing, the samples must be returned to room temperature and mixed thoroughly before use.

TEST PROCEDURE

* Note: Please read the instruction manual of this reagent carefully before all operations.


1. Restore the kit and sample to temperature (15 ~ 30 ° C).
2. Preparation: Open the packaging box, remove the test reagent card from the sealed aluminum foil bag, and lay it flat on a horizontal table.

- Aspirate 10 μ L of the sample (serum, plasma or whole blood sample) from the sample tube with a sample gun or a dropper.
- Drop the sample vertically into the sample hole on the test card. Immediately drop 2 drops (about 70 μ L) of the sample dilution liquid into the sample hole, and ensure that no air bubbles are generated during the operation. (Hint: the first 1-2 drops of sample dilution should be discarded, and then add the sample vertically to avoid air bubbles in the sample well)
- Timing, the result will be available within 15 minutes.




Interpretation of test results

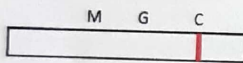
- The test card only has a purplish red line at position C of the quality control line, indicating that no new IgM antibodies and IgG antibodies to the new coronavirus were detected, and the test result was negative.



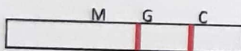
- A magenta line appears on the test card at the G position and the C control line, indicating that a new coronavirus IgG antibody was detected, and the test result was positive for IgG antibody.



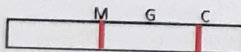
- A magenta line appears on the test card at the M position and the C control line, indicating that a new coronavirus IgM antibody was detected and the test result was positive for IgM antibody.



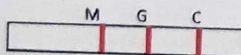- A magenta line appears on the test card at the M position / G position and the C control position, indicating that the new coronavirus IgM antibody and IgG antibody were detected, and the test results were positive for IgM and IgG antibodies.



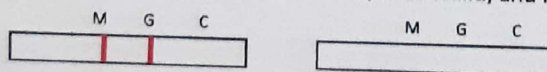- The test card does not appear at the position C of the quality control line, no matter whether the test line appears at the position M or G, it is invalid, and it should be tested again.





LIMITATIONS

1. This kit only provides qualitative results.
2. The test should be completed within 15 minutes after the sample is added, and the measurement result beyond 15 minutes is invalid.
3. The positive test result of this reagent does not mean that there is no infection with pathogens other than the new coronavirus. This kit is only used for initial screening, and the test results cannot be used as a basis for diagnosis. In order to ensure the accuracy of the test results, other clinical examination methods can be used for further diagnosis.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

SENSITIVITY AND SPECIFICITY

1. Negative reference product compliance rate: The company's negative reference product is used for testing. The negative reference product compliance rate should be 20/20.
2. Positive reference product compliance rate: The company's positive reference product is used as the sample for testing. The IgG and IgM positive reference product compliance rate should be 10/10.
3. Sensitivity: Use the company's sensitivity reference as the sample for detection. The L1 sensitivity reference should be IgG antibody positive and IgM antibody negative. The L2 sensitivity reference should be positive for IgG and IgM antibodies.
4. Precision: 10 samples of test strips are randomly selected from the same batch of kits, and the company's precision reference is used as a sample for parallel testing. The test results should be consistent, all positive, and the color rendering uniform.
5. Lot difference: 10 samples of test strips were randomly selected from three batches of kits, and the company's precision reference product was used as a sample for parallel testing. The test results should be consistent, all positive, and uniform color.

CROSS-REACTIVITY
















The Biopanda COVID-19 Rapid Test has been tested for anti-influenza A virus, anti-influenza B virus, anti-RSV, anti-Adenovirus, HBsAg, anti-Syphilis, anti-H. Pylori, anti-HIV and anti-HCV positive specimens. The results showed no cross-reactivity.

INTERFERING SUBSTANCES

The following compounds have been tested using the Biopanda COVID-19 Rapid Test and no interference was observed:

- Triglyceride: 50mg/dL
- Ascorbic Acid: 20mg/dL
- Hemoglobin: 1000mg/dL
- Bilirubin: 60mg/dL
- Total cholesterol: 6mmol/L

Label Introduce for user

Abbreviation	explanation	Abbreviation	explanation
	In vitro diagnostic medical device		Batch code
	Number of tests		Date of manufacture
	Manufacture		Use-by date
	EU Representative		Temperature: 4~30°C
	CE Label		Upright
	Caution		Keep dry
	Consult instructions for use		Fragile: handle with care
			Keep away from sunlight




BIBLIOGRAPHY

1. World Health Organization (WHO). WHO Statement Regarding Cluster of Pneumonia Cases in Wuhan, China. Beijing: WHO; 9 Jan 2020. [Accessed 26 Jan 2020]. <https://www.who.int/china/news/detail/09-01-2020-who-statement-regarding-cluster-of-pneumonia-cases-in-wuhan-china>
2. Weiss S R, Leibowitz J L. Coronavirus pathogenesis. *Adv Virus Res* 2011; 81:85-164. PMID: 22094080 DOI:10.1016/B978-0-12-385885-6.00009-2
3. Su S, Wong G, Shi W, et al. Epidemiology, genetic recombination, and pathogenesis of Coronaviruses. *Trends Microbiol* 2016; 24:490-502. PMID:27012512 DOI:10.1016/j.tim.2016.03.003
4. Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. *Nat Rev Microbiol* 2019;17:181-192.PMID:30531947 DOI:10.1038/s41579-018-0118-9
5. World Health Organization (WHO). Coronavirus. <https://www.who.int/health-topics/coronavirus>
6. <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.07.937862v1.full.pdf>

Label for aluminum foil bag

1 Test/Kit




**Novel Coronavirus(SARS-CoV-2)IgG/IgM
Antibody Combined Test Kit**


	20200202	
	2021.08.10	

Yuno Diagnostics Co., Ltd.

Label for Reagent Kit

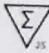
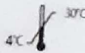



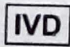

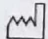



Novel
Coronavirus(SARS-CoV-2)
IgG/IgM Antibody
Combined Test Kit
(Colloidal Gold
Immunochromatographic
Assay)

	20200201
	2020.02.09
	2021.08.08




Label for carton

**Novel Coronavirus(SARS-CoV-2) IgG/IgM Antibody Combined
Test Kit(Colloidal Gold Immunochromatographic Assay)**

				20200201
				2020.02.09
				2021.08.08

Yuno Diagnostics Co., Ltd.
1,501, Building 3, Hongxin Industrial Park
.Guanguang Road1303., Guanlan Longhua
District, 518110, Shenzhen, Guangdong, P.R.
China

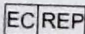Wellkang Ltd
16 Castle Street, Dover, CT16
1PW, England, UK

 16 Castle Street, Dover, CT16
1PW, England, UK



SAN PEDRO SULA
 Col. Santa Ana, 11 y 12 Avenida
 12 Calle, Bloque No. 117, N.O
 Tel: (504) 2552-0511/ 2550-3850
 Email: ffloresprodylab@gmail.com

TEGUCIGALPA
 Bldr. Suyapa, frente a Hospital Escuela
 Edificio Plaza San José, local No. 1
 Tel: (504) 2235-5636/ 2231-1268
 Email: yriveraprodylab@gmail.com

COTIZACION No. 655-20

CLIENTE : : Alcaldía Municipal de Santa María

Fecha: 26 de noviembre de 2020

ATENCIÓN:

Validez de la oferta: 03 de diciembre de 2020

DIRECCION: La Paz

Forma de pago: Contado

No.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL L.
1	INGM-MC42 Prueba Rapida COVID-19 IgG/IgM Suero/Plasma/Sangre, Kit de 25 unidades, marca: ADVIN *****UL*****	5,000.00	4	20,000.00
<i>Tiempo de entrega: Inmediata</i>		Sub Total L.		20,000.00
		ISV		*****
		Flete		150.00
		Total L.		20,150.00

www.prodylab.hn

Yulissa Rivera
 Firma autorizada
 Cel. 9944-9182

Grupo Meyk

RTN 080119002062818
Telefonos : (504) 2280-1241 , (504) 9457-9950

MCHMC99

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

COTIZACIÓN

Fecha
Sucursal
Vendedor
Condición de Pago

MK2005C02656
26/11/2020
MK2
TGU-Katherin Vasquez
Contado

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	1860	N95 3M - RESPIRADOR DE PARTICULAS PQ/20 - Verde	MT-HMC1	15	4,500.00	67,500.00
2	BT-200	DOPPLER FETAL 3MHz	MT-HMC1	5	3,478.26	17,391.30
3	12211	GORRO DESCARTABLES TIPO ENFERMERA	MT-HMC1	200	6.00	1,200.00
4	COVID19-TEST	PRUEBA RAPIDA DE ANTICUERPOS - COVID 19 IgG/IgM - CJ/20 UNIDADES	MT-HMC1	5	7,000.00	35,000.00
				Subtotal		L. 121,091.30
				Impuesto		L. 2,608.70
				Total		L. 123,700.00



CUENTAS PARA PAGOS Y RESERVAS DE PRODUCTOS



Imagina. Cree. Triunfa.

CTA. LPS #020111002463

**MONEDA: LEMPIRAS
TIPO DE CUENTA: CTA CORRIENTE / CHEQUES
A NOMBRE DE GLOBAL IMPORTS S DE RL
RTN 05019015756382**



CTA. LPS #728044431

**MONEDA: LEMPIRAS
TIPO DE CUENTA: AHORRO
A NOMBRE DE GLOBAL IMPORTS S DE RL
RTN 05019015756382**



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/11/2020

Hora : 11:55 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11354

L.: 26,261.69

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 777

Fecha de Emisión: 30/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

Id/RTN: 08019002278310

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COTIZACION #CDJ 936-2020 POR COMPRA DE DOPPLER VASCULAR SONO TRAX PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE DE LOS PLANES, EJECUTADO CON PROGRAMA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	26,261.69

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,261.69
Monto Total:		26,261.69

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	26,261.69
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,261.69



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldía (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNRuWn8b/EKgA6EddBhITar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFI
 TZSoygiVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00174

Programa: 77 Actividad 002 Proyecto No. —

Fecha: 30/11/2020 RTN Proveedor 08019002278370

SEÑOR (ES): Distribuidora Comercial S.A (DICOSA)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5	Doppler Vascular Sono Trax, marca Edan	4,567.25	22,836.25
		+ 75l. ISU		3,425.44
		TOTAL		26,267.69

Valor Total en letras: Veintiseis Mil Doscientos Sesentay Un Compras con 69/100

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque

OBSERVACIONES: para equipamiento de Centro de Triaje, ejecutado con Programa Fuerza Honduras.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL

Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO

Firma y sello



AUDITOR

Firma y sello



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICO S.A.)

FACTURA

N° 000-001-01-001.17132

N° 1 en Materiales y Equipos Médicos, desde 1972

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2011
CAJ: 324833-389906-904217-CFAE4E-05042E-3F
BANCO AUTORIZADO: BBS-B01-01-8012001 y BBS-001-01-8012008

Form fields: ZONA, RESPONSABLE, PEDIDO N, RTA CLIENTE ID, DIRECCION, AGENTE N, FECHA, ESTIMADO CLIENTE, CONDICIONES DE PAGO, FECHA DE VENCIMIENTO

Table with columns: CÓDIGO PRODUCTO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, I S V, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, VALOR TOTAL. Includes handwritten notes and a large DICO S.A. watermark.

CANCELADO stamp with date 03 de NOV 2010 and DICO S.A. logo.

Handwritten number: # 05026679

Summary table with rows for taxes (TASA ALICUOTA IVA, IMPORTE BRANCO IVA, IVA 18%), discounts (DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE EXENTO, IMPORTE ENDEBERADO), and totals (TOTAL L).

VER CONDICIONES AL REVERSO

PAYEE FORM: Pagaré por L. NOMBRE, EL DIA DE DEL 20 EN LAS OPORTUNIDADES DE ESTA CIUDAD. SORTE PAGAIRE NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDARAS OBLIGADO A PAGAR INTERESES MORATORIOS.

LA FACTURA ES REFERENTE DE TODOS, EJEMPLA

N° 00 117132

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA
N° Ref Bancaria: 8946340 Fecha: 30/11/2020 10:49:05 a.m.

Monto Débito: LPS 26,261.69
Monto Crédito: 0.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***061-1
Cuenta Destino: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
11-412-130380-9
DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

Descripcion: cot-cdj9362020 doppler

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Banca por Internet



Usuario: gargueta0009

Fecha: 30/11/2020 10:49:11 a.m.

Grupo Meyko

RTN 080119002062818
Telefonos : (504) 2280-1241 , (504) 9457-9950

MCHMC99
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

COTIZACIÓN

MK2005C02656

Fecha 26/11/2020
Sucursal MK2
Vendedor TGU-Katherin Vasquez
Condición de Pago Contado

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	1860	N95 3M - RESPIRADOR DE PARTICULAS PQ/20 - Verde	MT-HMC1	15	4,500.00	67,500.00
2	BT-200	DOPPLER FETAL 3MHz	MT-HMC1	5	3,478.26	17,391.30
3	12211	GORRO DESCARTABLES TIPO ENFERMERA	MT-HMC1	200	6.00	1,200.00
4	COVID19-TEST	PRUEBA RAPIDA DE ANTICUERPOS - COVID 19 IgG/IgM - CJ/20 UNIDADES	MT-HMC1	5	7,000.00	35,000.00
					Subtotal	L. 121,091.30
					Impuesto	L. 2,608.70
					Total	L. 123,700.00



Barrio Sabana Grande, Final de Ave. Los Próceres. (Calle de Cortitelas y Keymart)
Edificio Dicosa #4002, Apartado Postal Nº 3307
Tegucigalpa M. D. C., Honduras C. A.
Tels. PBX. 2221-1969 al 73 Fax. 2221-1968
email. info@dicosa.net www.dicosa.net

COTIZACIÓN CDJ 936-2020

Cliente: MUNICIPALIDAD SANTA MARIA DE LA PAZ Fecha: 26-nov-20
Atención:
Teléfono/Fax: Referencia: Via Oficina
Dirección
Celular:
e-mail:

DE ACUERDO A SU SOLICITUD DE COTIZACION, NOS AGRADA PRESENTARLE NUESTROS MEJORES PRECIOS.

ITEM	CANTID.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CAT.	MARCA	PRECIOS		
						UNITARIO	ISV	TOTAL
1	5	C/U	DOPPLER VASCULAR SONO TRAX		EDAN	L. 4,567.25	X	22,836.25
			*****UL*****					
OBSERVACIONES: Gracias por darnos la oportunidad de atenderlos. Para cualquier consulta no dude en contactarnos. <i>Estamos para Servirle!!!</i>						Sub Total		L. 22,836.25
						15% I.S.V.		L. 3,425.44
						TOTAL LEMPIRAS		L. 26,261.69

NOTA: Productos marcados con X Pagan ISV
Tiempo de entrega: Inmediata
Forma de Pago: Contado
Validez de Cotización: 3 días
Lugar de entrega: Tegucigalpa

Cotizado por: Rosa Palma
Celular # 9620-0493
e-mail: rpalma@dicosa.net



Autorizado por: Gerencia Nacional de Ventas
Cel. 9969-5503

Nombre y firma de recibido (*Orden y condiciones aceptadas*)
Se aceptó esta Orden de Compra el día:

Desde 1971, Experiencia, Calidad y Liderazgo.!!!

Abre cuentas para depósitos o transferencias bancarias



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

Material y Equipo Médico fundada en 1971

TELÉFONOS

(-504) 2221-1970 AL 74
(-504) 2550-7072 AL 75



WHATSAPP

TGU (-504) 9620-0493
SPS (-504) 9876-4192

www.dicosa.net

CUENTAS EN LEMPIRAS

 Ficohsa # 001-102-704-29

 BAC CREDOMATIC # 730-004-931

 Banco de Occidente S.A. #11-412-130-3809

 BANPAIS #01-599-000-2932

 Banco Atlántida #110-0189-859

 LAFISE #11450-30000-135

 BANCO FICENSA #1205-7501



Barrio Sabana Grande, Final de Ave. Los Próceras. (Calle de Cortitelas y Keymart)
Edificio DicoSA #4002, Apartado Postal Nº 3307
Tegucigalpa M. D. C., Honduras C. A.
Tels. PBX. 2221-1969 al 73 Fax. 2221-1968
email: info@dicoSA.net www.dicoSA.net
RTN: 08019002278310

COTIZACION # CDJ2977 2020

Cilente: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE LA PAZ
Atención: PAZ
Teléfono/Fax: Fecha: 26 de noviembre de 2020
Dirección: Ref. Cliente: Via Correo Electronico
Celular:
e-mail:

DE ACUERDO A SU SOLICITUD DE COTIZACION, NOS AGRADA PRESENTARLE NUESTROS MEJORES PRECIOS.

ITEM	CANTID.	UNIDAD	DESCRIPCION	CÓDIGO	MARCA	PRECIOS		
						UNITARIO	ISV	TOTAL
1	5	CAJA/20	PRUEBAS RAPIDAS PARA COVID/REGALIA 50 MASCARILLAS KN95		NOVA TEST	L. 3,600.00		L. 18,000.00
2	2	CAJA/100	GORROS QUIRURGICOS			L. 200.00		L. 400.00
3	5	UNIDAD	DOPPLER VASCULAR SONO TRAX			L. 4,567.25	X	L. 22,836.26
			***** UL *****					
Gracias por darnos la oportunidad de atenderlos. Para cualquier consulta no dude en contactarnos. <i>Estamos para Servirle!!!</i>						Sub Total		L. 41,236.26
						15% I.S.V.		L. 3,425.44
						TOTAL LEMPIRAS		L. 44,661.70

NOTA: Productos marcados con X pagan impuestos sobre venta.
Tiempo de entrega: 60 días
Forma de Pago:
Validez de Cotización: 3 días o hasta agotar existencias
Lugar de entrega: Tegucigalpa

Cotizado por: Bayron Hernández
Celular# 9939-0111
e-mail: dicoSA33@dicoSA.net



Nombre y firma de recibido (Orden y condiciones aceptadas)

Se aceptó esta Orden de Compra el día:

Autorizado por:

Bayron Hernández

Desde 1971, Experiencia, Calidad y Liderazgo!!!